


ORTHESE

Snorlight

[www.snorlight.com](http://www.snorlight.com)



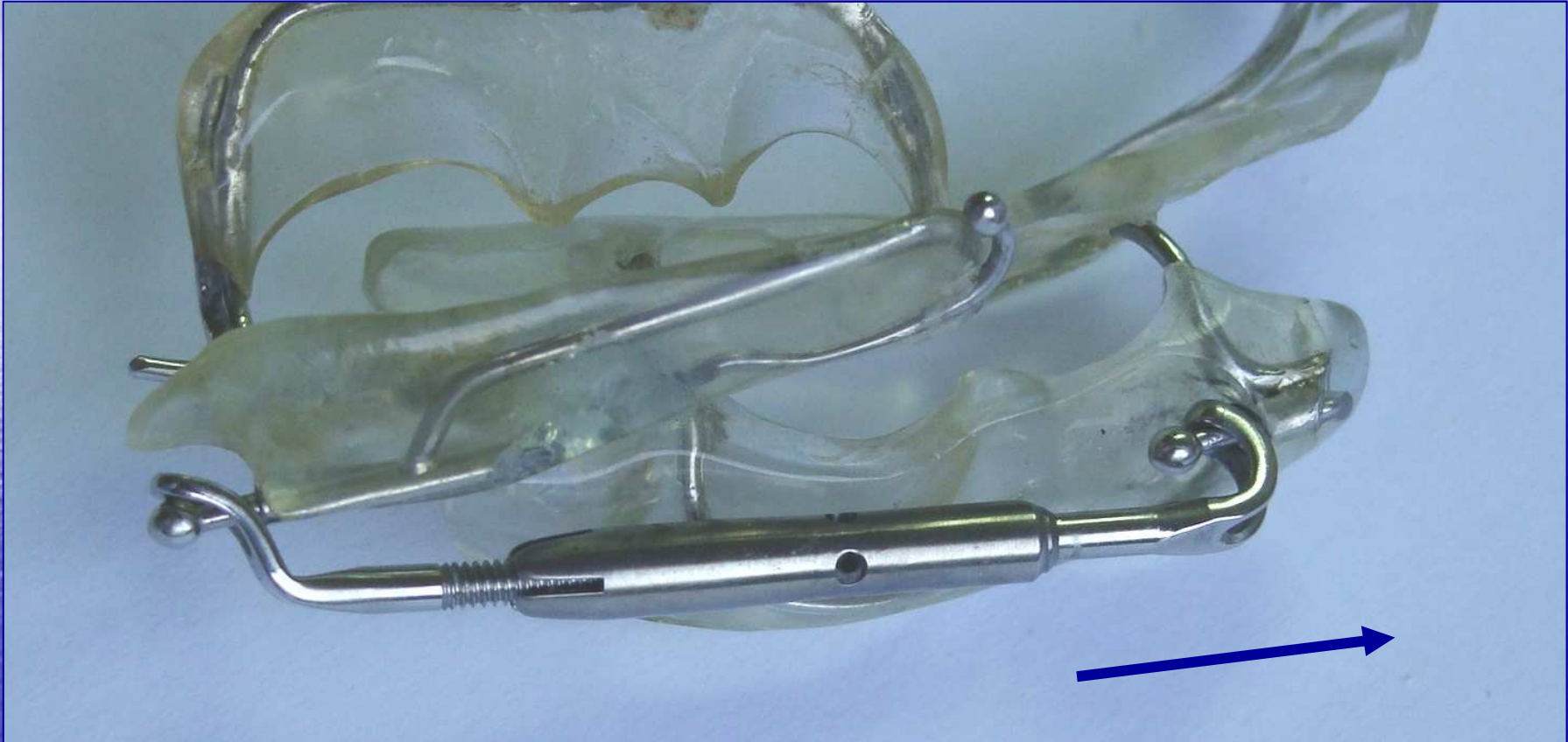

**Il est conseillé de dormir en interposant la langue entre les dents pour retenir celle-ci et dégager parfaitement les voies aériennes postérieures.**




**To improve breathing when sleeping, patient can interpose his tongue between his front teeth, so he enlarge the posterior space for better efficiency.**





Sans / Without

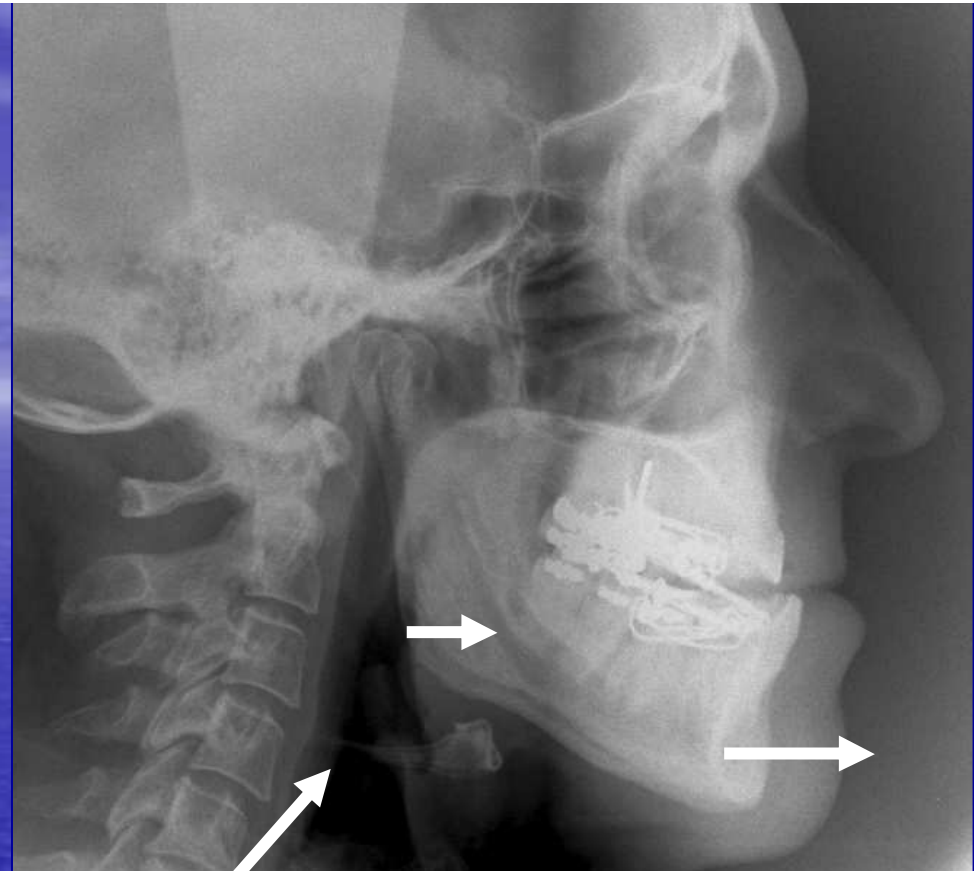

Avec / With Snorlight

On note une remontée en haut et en avant de l'os hyoïde, une avancée de la base de la langue qui libère considérablement les voies aériennes postérieures.

We can observe how the mandibular advancement improve largely posterior airways.



Propulsion du départ : 50 % de la propulsion maximale

Augmenter de 1mm par semaine soit 3 tours complets en dévissant de droite à gauche

Jusqu'à 75 – 80 % de la propulsion maximale.



First mandibular advancement: 50% of maximal protrusion

Increase mandibular advancement 1mm per week = 3 full turns (from right to the left)

Until 75 – 80 % of maximum advancement.

[www.snorlight.com](http://www.snorlight.com)